



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Andador y rehabilitador de la marcha GRILLO

ref: GRILLO

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/caminadores-ninos/andador-y-rehabilitador-de-la-marcha-grillo>



Grillo es un andador diseñado para ayudar y/o facilitar el desplazamiento autónomo del niño. Su diseño original y su sistema de regulación en altura patentado hacen que sea único en cuanto a seguridad y elegancia. Su amplio rango de regulaciones y su amplia gama de soportes hacen que se adapte con facilidad a las diferentes necesidades y características del usuario.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Diseñado para la independencia de niños y adultos.

Ser capaz de moverse de forma independiente en su propio entorno es de fundamental importancia para el desarrollo de habilidades sociales e interpersonales; de hecho, la participación activa en la comunidad representa un incentivo sustancial para no considerar las limitaciones como obstáculos insuperables.

Sistema de regulación en altura con baricentro constante patentado.

Mantiene el centro de gravedad del niño a lo largo de su eje, también durante la regulación en altura del chasis.

El sistema de regulación en altura con baricentro constante permite al Grillo acompañar al niño en su crecimiento durante mucho tiempo y con una sola medida.

El sistema de regulación, mediante pistones de gas, permite la regulación del chasis también con el niño dentro, tanto en la fase estática como dinámica con total seguridad y de manera sencilla.



Cierre sencillo y rápido.

El Grillo puede cerrarse con una sola maniobra, reduciendo así sus dimensiones y aumentando la facilidad de transporte. El cierre se efectúa plegándose sobre sí mismo sin la necesidad de tener que retirar ningún soporte.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



SIZE **mini** **S** **M** **L**

GRILLO DELANTERO Configuración P

Con soporte pélvico y manillar.
Para usuarios con un discreto control del tronco, que necesitan un soporte para la pelvis.



SIZE **mini** **S** **M** **L**

GRILLO DELANTERO Configuración PT

Con soporte pélvico, soporte torácico y manillar.
Para usuarios que necesitan apoyo tanto en el tronco como en la pelvis y una referencia delantera. Con dos soportes independientes es posible flexionar el tronco hacia delante facilitando de este modo el clico de la marcha.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



GRILLO DELANTERO Configuración PA

Con soporte pélvico y soporte de antebrazos.

Para usuarios con un control parcial del tronco, que necesitan apoyo en la pelvis. El apoyo en las extremidades superiores ayuda al usuario a controlar incluso el tronco.



GRILLO DELANTERO Configuración PTM

Con soporte pélvico, mesa y manillar.

Para usuarios que necesitan apoyo tanto en el tronco como en la pelvis y una referencia delantera. El apoyo en las extremidades superiores ayuda al usuario a controlar incluso el tronco.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



SIZE mini SIZE S SIZE M SIZE L

GRILLO POSTERIOR Configuración P

Con soporte pélvico y empuñaduras extraíbles. Versión que ofrece una contención para la pelvis. Indicado para usuarios con un control discreto del tronco.



SIZE mini SIZE S SIZE M SIZE L

GRILLO POSTERIOR Configuración PT

Con soporte pélvico, soporte torácico y empuñaduras extraíbles. Para usuarios que necesitan apoyo tanto en el tronco como en la pelvis y una referencia posterior. Con dos soportes independientes es posible flexionar el tronco hacia delante y facilitar de este modo el ciclo de marcha.




SIZE mini SIZE S SIZE M SIZE L

GRILLO POSTERIOR Configuración PA

Con soporte pélvico y antebrazos. Versión que ofrece un soporte para la pelvis y un soporte para las extremidades superiores. Indicado para usuarios con un control discreto del tronco. El apoyo en las extremidades superiores ayuda al usuario a controlar también el tronco.

GRILLO DELANTERO

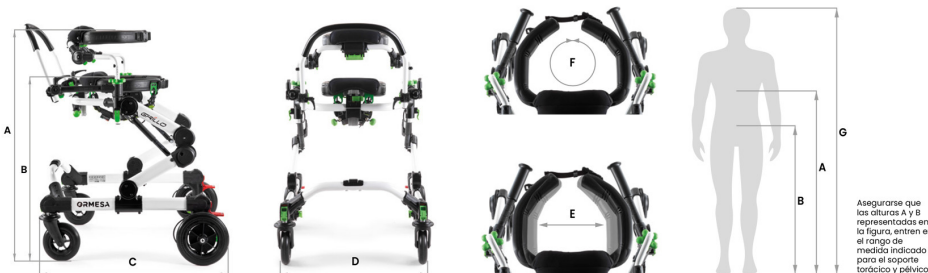

Asegurarse que las alturas A y B representadas en la figura, entren en el rango de medida indicado para el soporte torácico y pélvico.

GRILLO DELANTERO MEDIDAS Y PESOS:






Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

	mini PTM	mini	small	medium	large
A: altura sop. torácico - suelo	de 60 a 76 cm	de 51 a 75 cm	de 66 a 100 cm	de 73 a 124 cm	de 84 a 147 cm
B: altura sop. pélvico - suelo	de 42 a 61 cm	de 42 a 61 cm	de 49 a 84 cm	de 54 a 100 cm	de 63 a 120 cm
C: longitud total	74,5 cm	74,5 cm	75 cm	91 cm	111 cm
D: ancho total	62 cm	62 cm	69 cm	76 cm	80 cm
E: ancho de los soportes	de 19 a 25 cm	de 19 a 25 cm	de 19 a 25 cm	de 22 a 36 cm	de 24 a 40 cm
F: circunferencia de los soportes	de 53 a 79 cm	de 53 a 79 cm	de 60 a 86 cm	de 74 a 120 cm	de 81 a 140 cm
G: altura usuario	de 75 a 95 cm	de 75 a 95 cm	de 90 a 135 cm	de 110 a 165 cm	de 150 a 190 cm
Peso Dispositivo	15,4 kg	15 kg	19 kg	22,5 kg	29,5 kg
Carga Máxima	35 kg	35 kg	45 kg	90 kg	110 kg

GRILLO POSTERIOR

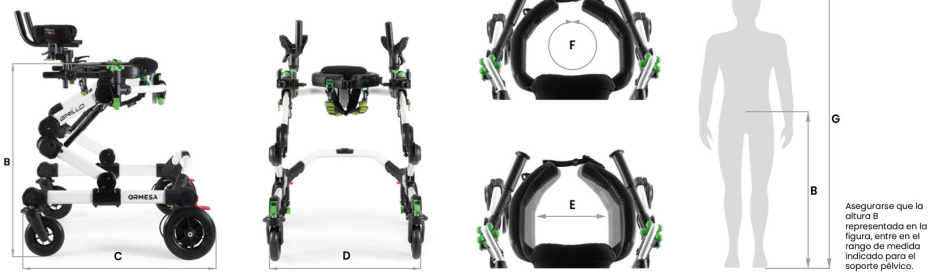

GRILLO POSTERIOR MEDIDAS Y PESOS:

	mini	small	medium	large
B: altura sop. pélvico - suelo	de 42 a 61 cm	de 49 a 84 cm	de 54 a 100 cm	de 63 a 120 cm
C: longitud total	74,5 cm	75 cm	91 cm	111 cm
D: ancho total	62 cm	69 cm	76 cm	80 cm
E: ancho de los soportes	de 19 a 25 cm	de 19 a 25 cm	de 22 a 36 cm	de 24 a 40 cm
F: circunferencia de los soportes	de 53 a 79 cm	de 60 a 86 cm	de 74 a 120 cm	de 81 a 140 cm
G: altura usuario	de 75 a 95 cm	de 90 a 135 cm	de 110 a 165 cm	de 150 a 190 cm
Peso Dispositivo	15 kg	18,5 kg	21,7 kg	28,5 kg
Carga Máxima	35 kg	45 kg	90 kg	110 kg





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

ACCESORIOS OPCIONALES:



927 Empuñaduras extraíbles
Regulables en ancho, de manera independiente.



919 Soporte lumbar regulable
Regulable en altura. Solo para talla S y M.



918 Asiento plegable
Regulable en altura y plegable. Solo para talla S y M.



946 Asiento ergonómico
Regulable a través de correas.



815 Asiento abductor
Regulable en altura. Proporciona un apoyo seguro en caso de necesidad, puede plegarse durante la marcha.



930 Arnés ergonómico
Reducible opcionalmente para las medidas M y L.
Posibilidad de posicionar:
> Cinturones talla S en Grillo M.
> Cinturones talla M en Grillo L.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



890-C Separador de piernas con musleras

Colocado sobre la rodilla, contrarresta la aducción de las extremidades inferiores. Guía y acompaña el ciclo de la marcha facilitando la secuencia correcta de los movimientos durante la deambulación. Regulable en altura y circunferencia para adecuarse a las diferentes constituciones; además, es posible regular la amplitud de la zancada. Con un diseño innovador, las musleras, con forma ergonómica, ofrecen tres grados de libertad: en sentido longitudinal, en sentido vertical y en rotación, siguiendo los movimientos fisiológicos naturales de la marcha.



890-SC Separador de piernas Regulable en altura.



810 Barras estabilizadoras

Grillo Small + 2,6 kg. x 2.
Grillo Medium y Large + 3,4 kg. x 2.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



928 Ruedas traseras para base estrecha con pedales para frenos de estacionamiento

Par de ruedas fijas Ø200 y horquillas con pedales para freno de estacionamiento. El ancho del bastidor se reduce:
talla M desde 76 cm a 68,5 cm
talla L desde 80 cm a 72,5 cm.



Ruedas traseras con:

- > Anti-marcha atrás.
- > Frenado regulable.
- > Freno de estacionamiento.



939 Empuñaduras ergonómicas

Regulables en altura, inclinación, en antero-posterior, en rotación y en ancho.



865 Cabezal ajustable

Regulable en altura, inclinación y antero-posterior.



925 Soporte torácico

Posibilidad de posicionar el soporte torácico, cambiando los tubos, como a continuación se indica:
> Sop. torácico talla mini en Grillo S.
> Sop. torácico talla S en Grillo M.
> Sop. torácico talla M en Grillo L.



924 Soporte pélvico

Posibilidad de posicionar el soporte pélvico como a continuación se indica:
> Sop. pélvico talla mini en Grillo S.
> Sop. pélvico talla S en Grillo M.
> Sop. pélvico talla M en Grillo L.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



923 Asa de empuje para cuidador

Regulable en altura.



894 Cinturón trasero mesa para Grillo PTM talla mini

Regulable en circunferencia.



926 Manillar regulable

Regulable en profundidad, altura e inclinación.



809 Soporte de antebrazos

Regulables en profundidad, inclinación, rotación, altura y pronosupinación.



943 Correas para antebrazo

Regulables en circunferencia.



809 Soportes de antebrazo para talla mini

Regulables en altura, profundidad y rotación.





Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia

TABLA DE ACCESORIOS COMPATIBLES:

		915	926	924	910	934	928	929	929	943	909-914
		Control	Control	Control	Control	Control	Control	Control	Control	Control	Control
Delanteros	PT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PIM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Posterior	PT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PIM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Delanteros	PT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PIM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Posterior	PT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	PA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PIM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

