



Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia

Andador TREKKER

ref: TK..

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/caminadores-ninos/andador-trekker>



El andador Trekker ofrece una gran variedad de niveles de apoyo para los niños que requieren asistencia para caminar. Puede usarse como andador anterior o posterior.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



- Facilita y ayuda al traslado autónomo del niño.
- Entrenamiento para iniciar deambulación autónoma.
- Disponibles en tres tallas.
- Altura ajustable en incrementos de 2,5 cm.
- Se puede usar en postura anterior y posterior proporcionando mayor flexibilidad al niño.
- Mecanismo de bloqueo direccional en las cuatro ruedas para facilitar el paso de ruedas giratorias a fijas.
- Resistencia variable para controlar la velocidad de giro de las ruedas.
- Freno para bloquear las ruedas y proporcionar estabilidad.
- Palanca anti-retroceso que permite la movilidad tanto hacia delante como hacia atrás. O únicamente hacia delante.
- Trekker Junior y Juvenil se pliegan fácilmente para facilitar su transporte y almacenaje.
- Accesorios de montaje sin herramientas, se pueden añadir o quitar según las habilidades y necesidades del usuario.



Disponible en tres tallas con una amplia gama de accesorios opcionales.

ACCESORIOS OPCIONALES:





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Asas para las manos Ref.: TK 1010



Maneta de empuje Ref.: TK 1020



Empuñaduras Ref.: TK 1045



Sujeción de tobillos

Ref.: Para modelo
TK 1060S ... TK 1000
TK 1060M ... TK 2000
TK 1060L TK 3000




Posicionador de cadera

Ref.: TK 1070S - TK 1070L



Asiento arnés

Ref.: KS300-L / KS300-SM

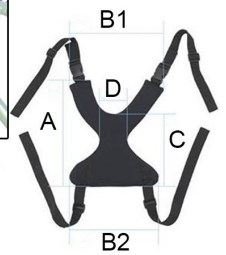

	Pequeño	Grande
A	28 cm	41 cm
B1	22 cm	27 cm
B2	25 cm	32 cm
C	19 cm	30 cm
D	7 cm	10 cm





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Soportes de antebrazo
Ref.: TK 1035S - TK 1035L



Sujeción de pierna
Ref.: TK 1090S - TK1090L



Soporte de tronco
Ref.: TK 1080S, TK 1080M, TK 1080L



Empuñaduras

Pueden ser montadas en cualquier lugar del manillar y son regulables en altura y giro.

Soportes de antebrazo

- Ajustable en altura y profundidad. Los soportes pueden girar, pronar o supinar. Las empuñaduras se pueden mover hacia adelante o hacia atrás, supinación, pronación y se pueden ajustar en ángulo.
- Pueden montarse hacia el interior o el exterior del manillar.

Sujeción de tobillos

Usado por pacientes con espasticidad, control deficiente, ataxia y aducción excesiva. Longitud ajustable, correas de tobillo acolchadas, para mantener piernas y/o pies en abducción y prevenir marcha en tijera.

Posicionador acolchado de cadera

Altura de arnés de asiento ajustable, coloca cadera y pelvis, y permite al usuario cambiar el peso de una pierna a la otra. Se pueden acortar las correas para ayudar en la carga de peso o alargar las correas para usarlas como cable de seguridad. La posición de las correas en el manillar afectará a la posición de la pelvis del niño. Almohadilla extraíble que proporciona comodidad.

Soporte de tronco

- Asegura el tórax en el ángulo deseado.
- Acolchado, ajustable en altura, profundidad, anchura y ángulo.
- En su posición más baja, puede usarse como posicionador pélvico.
- Los ajustes se pueden hacer mientras el usuario está en el andador.

Sujeción de pierna

- Ajustable en altura. Puede colocarse más cerca o más lejos del usuario para limitar la aducción/abducción.
- Movimientos con el patrón de marcha de usuario que permite el cambio de peso de una pierna a otra.
- Evita que se crucen las piernas.

Tabla de medidas y modelos

Modelo	TALLAS	Altura ajustable	Ancho total	Ancho entre puños	Largo total	Carga máx.
---------------	---------------	-------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	-------------------





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

TK 1000	Infantil	38 - 47 cm	56,5 cm	32 cm	81 cm	34 kg
TK 2000	Junior	56 - 66 cm	62 cm	43 cm	79 cm	68 kg
TK 3000	Juvenil	74 - 99 cm	67 cm	46 cm	94 cm	90 kg

