






**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



En la mayoría de casos, las caderas y las rodillas deberían estar a la misma altura. Un asiento demasiado bajo puede estar desaconsejado (postoperados de cadera) y resultar incómodo para levantarse.

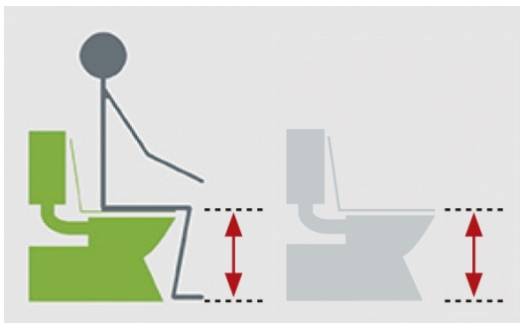

- 1.** Mida la distancia entre el suelo y la parte baja del muslo, justo detrás de la rodilla. Esta es la altura de asiento recomendada.
- 2.** Mida la altura de su asiento actual y réstela de la primera medida.
- 3.** La diferencia entre las dos medidas es la altura del asiento elevador requerida. Adquiera el elevador con la medida más próxima. Las disponibles en el mercado son 5, 10 y 15 cm.





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

100

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Descripción	Altura regulable	Ancho total sin reposabrazos	Ancho total con reposabrazos	Ancho entre reposabrazos	Fondo total	Ancho orificio	Fondo orificio
AD510	Con reposabrazos	5 - 10 - 15cm	37cm	61cm	51cm	49cm	23cm	28cm
AD510S	Sin reposabrazos	5 - 10 - 15cm	37cm	Sin reposabrazos	Sin reposabrazos	48cm	23cm	28cm

