



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Andador posterior NIMBO

ref: KA1200N

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/caminadores-ninos/andador-posterior-nimbo>



El andador posterior Nimbo ayuda al usuario a mantener una postura erguida con el tronco extendido, adecuado para niños con parálisis cerebral y otras disfunciones neurológicas.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



-Ajuste de la altura sin herramientas. Mangos con terminaciones redondeadas permiten un agarre firme y confortable.

-Ruedas suaves de caucho se adhieren a cualquier superficie y previenen que el andador se deslice hacia atrás.

-Ruedas traseras unidireccionales con mecanismo antiretorno.

-Ruedas delanteras giratorias mejoran la maniobrabilidad y la facilidad de giro.

-Un mecanismo las modifica fácilmente para que sean giratorias o no.



Plegable y de estructura ligera y robusta de aluminio en colores brillantes.



**5 TALLAS DISPONIBLES:**

Chasis de color rojo: Tallas S y L

Chasis color azul: Talla M

Chasis color negro: Tallas XL y XXL





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### Soportes de antebrazo


Ref.: KA 1035 FPS Pequeño  
(Unidad)

Ref.: KA 1035 FPL Grande  
(Unidad)

- Altura y profundidad regulables.
- Las asas se extienden hacia delante o hacia atrás a la posición deseada. Ángulos de pronación y supinación modificables.
- Tiras de velcro para evitar el deslizamiento lateral de los brazos.
- Se incluyen espaciadores para aumentar el rango lateral.



	Pequeño	Grande
A	28 cm	41 cm
B1	22 cm	27 cm
B2	25 cm	32 cm
C	19 cm	30 cm
D	7 cm	10 cm

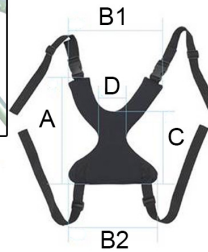

### Asiento arnés

Ref.: CE 1070S Pequeño

Ref.: CE 1070L Grande

- El arnés del asiento añade soporte al usuario.
- Útil como arnés de seguridad que ayuda a soportar el peso y a mantener la postura pélvica correcta.
- Se mueve con el patrón de marcha del usuario y le permite cambiar el peso de una pierna a la otra.
- Las correas se pueden alargar, acortar y colocar hacia delante o hacia atrás del andador para adaptarse a los requisitos de apoyo del usuario.



### Estabilizador pélvico

Ref.: KA 1050

- Recomendado a usuarios que tienen una postura asimétrica de pie o andando y que no pueden centrarse en el andador.
- Altura y ancho ajustables.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### Asiento rígido

Ref.: Para modelo  
KA 1285 ... KA 1200N  
KA 2285 .... KA 2200N  
KA 3285 .... KA 3200N  
KA 4285 .... KA 4200N

El asiento se monta fácilmente en el andador para dar una plataforma de descanso cuando sea necesario. Se pliega fácilmente para andar y se coloca otra vez para descansar.



### Regulador de velocidad. (Par)

Ref.: KA 1400

Permite variar la resistencia en una o ambas ruedas para controlar la velocidad y alinear patrones de marcha asimétricos.



### Bumpers. (Par)

Ref.: KA 8000

## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Tallas	Altura puños	Ancho total	Ancho entre puños	Peso	Carga máx.	COLOR
KA 1200N	Andador infantil	51,5 - 65 cm	65 cm	34,5 cm	4 kg	34 kg	Rojo
KA 2200N	Andador junior	61 - 80,5 cm	66 cm	38,5 cm	5 kg	39 kg	Azul
KA 3200N	Andador juvenil-adulto	75,5 - 95 cm	72 cm	41,5 cm	6 kg	68 kg	Rojo

