



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Elevadores de WC 'Ashby y Derby'

ref: AD507/AD508

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/elevadores-y-reposabrazos-para-wc/elevadores-de-wc-ashby-y-derby>




Elevadores universales de WC. Se adaptan a casi todas las tazas de inodoro. De construcción plástica de una sola pieza para una higiene total. Se montan fácilmente sin herramientas.

### Escoger el asiento adecuado





En la mayoría de casos, las caderas y las rodillas deberían estar a la misma altura. Un asiento demasiado bajo puede estar desaconsejado (postoperados de cadera) y resultar incómodo para levantarse.

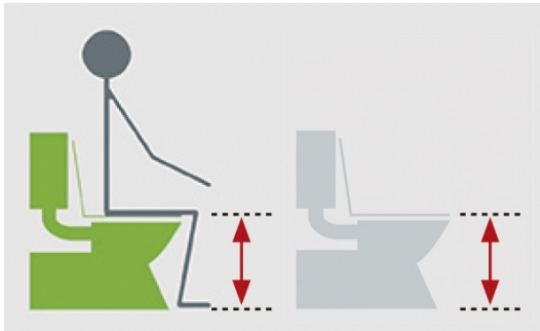

1. Mida la distancia entre el suelo y la parte baja del muslo, justo detrás de la rodilla. Esta es la altura de asiento recomendada.
2. Mida la altura de su asiento actual y réstela de la primera medida.
3. La diferencia entre las dos medidas es la altura del asiento elevador requerida. Adquiera el elevador con la medida más próxima. Las disponibles en el mercado son 5, 10 y 15 cm.

### Tabla de medidas y modelos

Modelo	Alto	Tapa	Ancho orificio	Fondo orificio
AD508C	5 cm	No	20 cm	25 cm
AD507	10 cm	No	20 cm	25 cm
AD508A	15 cm	No	20 cm	25 cm





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

AD507-LUX	10 cm	Sí	20 cm	25 cm
AD508A-LUX	15 cm	Sí	20 cm	25 cm

